




Produkt Produktnummer	PLUS Waschtisch-Lifter mit kabelgebundener Fernbedienung, elektrisch höhenverstellbar og manuell seitlich verschiebbar R4781
Produktbeschreibung	VVS: 654003220 NRF: 6132538 RSK: 7972596 EAN: 5708590309347 HMI: 71755 NBS: N13:30,335  PLUS Waschtisch-Lifter sind in elektrisch, pneumatisch und manuell höhenverstellbaren Versionen erhältlich. Sie eignen sich zur Montage an der Wand oder zur Montage an Pressalit PLUS Wandschienen. PLUS Waschtisch-Lifter, mit Elektromotor und kabelgebundener Fernbedienung. Um 300 mm elektrisch höhenverstellbar und seitlich verschiebbar. Empfehlung: Zu- und Ablaufsystem R2064/R2065/R2067. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht und ABS-Polymer. Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch, exkl. waagerechter PLUS Wandschiene.
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhen- und seitlich verstellbar 300 mm Maximale Belastbarkeit: 100 kg. Geeignet für Waschtische von bis zu 22 kg. Bei einer Belastung mit 100 kg, trägt jede Befestigungsschraube 22 kg. <i>Die Waschtisch-Lifter müssen in der Lage sein, das Gewicht des Waschtisches und das Gewicht der Person zu tragen, die den Waschtisch benutzt, um sich aus der sitzenden Position aufzurichten. Weder der Waschtisch noch der Waschtisch-Lifter sind zum Tragen einer Person bestimmt. Eine für den Waschtisch-Lifter geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung an der Vorderkante des Waschtisches bei 75% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 100 kg und das Gewicht des Waschtisches 22 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 104 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i>
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindigkeit aufwärts: 20 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 23 mm/s



Produkt	PLUS Waschtisch-Lifter mit kabelgebundener Fernbedienung, elektrisch höhenverstellbar og manuell seitlich verschiebbar
Produktnummer	R4781
Geräusch	45 dB
Materialien	Der Waschtisch-Lifter besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Die Abdeckung des Waschtisch-Lifters ist mit Endkappen aus ABS-Polymer versehen. Die kabelgebundener Fernbedienung ist mit Polypropylen verkleidet.
Ergonomie	Die Waschtischhöhe lässt sich mithilfe der kabelgebundener Fernbedienung einstellen. Der Waschtisch-Lifter passt für alle Waschtischtypen mit Bolzenaufhängung. Das abgerundete und schlanke Design gestaltet die Reinigung einfach und unkompliziert.
Funktionen	Die kabelgebundener Fernbedienung wird mit Wandhalter geliefert.
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA40 (Linak) 4000N, IPX6
Steuerkasten	SMPS14002
Kabelgebundener Fernbedienung	HB3 (Linak) IPX6
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 75 W Stromverbrauch, standby: 1,5 W
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

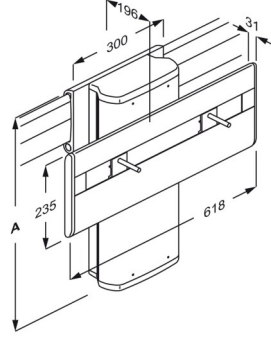

Produkt	PLUS Waschtisch-Lifter mit kabelgebundener Fernbedienung, elektrisch höhenverstellbar og manuell seitlich verschiebbar
Produktnummer	R4781
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewungenen Tuch nachgetrocknet werden.
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist produziert worden gemäß: - Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.