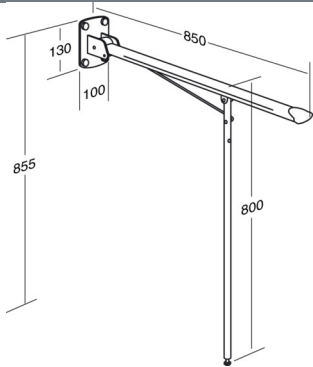




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	VALUE Stützklappgriff, Festmontage R1102000
Farbe	VVS:615722380 NRF:6191677 RSK:7972411 EAN:5708590192345 HMI: 29695 NBS:N13:436 DB: 2109684 FDA:ILS/D135866 Weiß
Produkt- beschreibung	 VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze, zur Festmontage, hochklappbar, Ausladung 850 mm, Höhe 800 mm. Das ergonomische Design sorgt für einen festen und angenehmen Halt sowie ein gutes Gefühl davon, wo die Stütze endet. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden. VALUE Stützklappgriff mit Bodenstütze, zur Festmontage, hochklappbar, Ausladung 850 mm, Höhe 800 mm. Das ergonomische Design sorgt für einen festen und angenehmen Halt sowie ein gutes Gefühl davon, wo die Stütze endet. Materialien: Rilsan-beschichteter Stahl, druckgegossenes Aluminium, Kunststoff. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden.
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Maximale Belastung: 135 kg. Bei einer Belastung der Stützklappgriff mit 135 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 81 kg belastet.
Materialien	Hauptmaterial: Stahl Oberfläche: Rilsan Endkappen: Nylon (PA)



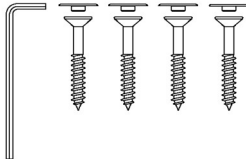
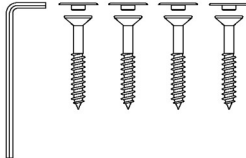
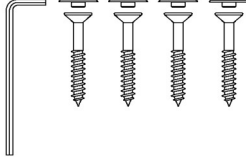
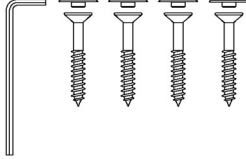
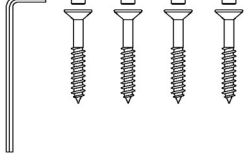
Produkt	VALUE Stützklappgriff, Festmontage
Produktnummer	R1102000
Ergonomie	Die Griffe bieten eine gute Hilfe beim Hinsetzen, Sitzen, Aufstehen und Stehen. Gute breite Stützflächen für Hände und Arme sowie die abgerundete Form geben einen sicheren Halt.
Funktionen	Der Stützklappgriff kann hochgeklappt werden, um Platz zu schaffen. Mit Bodenstütze für besonderen Halt.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.



PRESSALIT®

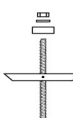
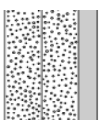
Produkt	VALUE Stützklappgriff, Festmontage
Produktnummer	R1102000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	VALUE Stützklappgriff, Festmontage R1102000		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

Inkl. Befestigungsschrauben für Wand. Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrekte Dübeln verwendet werden. Bitte Montageanleitung sehen.

pressalit.com