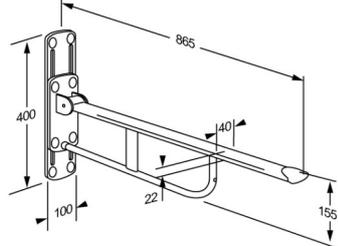




Produkt	VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar
Produktnummer	R1110000
Farbe	Weiß
Produktbeschreibung	<p>VVS:615722405 NRF:6191643 RSK:7972412 EAN:5708590176420 HMI: 25413 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866</p>  <p>VALUE Stützklappgriff, Wandmontage, hochklappbar, um 150 mm höhenverstellbar, Ausladung 865 mm. Das ergonomische Design sorgt für einen festen und angenehmen Halt sowie ein gutes Gefühl davon, wo die Stütze endet. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden.</p> <p>VALUE Stützklappgriff, Wandmontage, hochklappbar, um 150 mm höhenverstellbar, Ausladung 865 mm. Das ergonomische Design sorgt für einen festen und angenehmen Halt sowie ein gutes Gefühl davon, wo die Stütze endet. Materialien: Rilsan-beschichteter Stahl, druckgegossenes Aluminium, Kunststoff. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden.</p>
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	150 mm
Produktkapazität	Maximale Belastung: 120 kg. Bei einer Belastung der Stützklappgriff mit 120 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 86 kg belastet.
Materialien	Hauptmaterial: Stahl Oberfläche: Rilsan Endkappen: Nylon (PA)

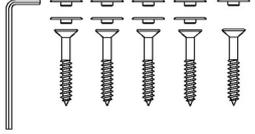
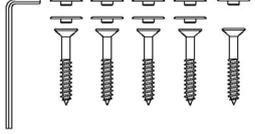
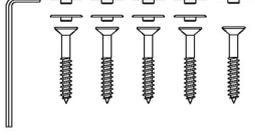
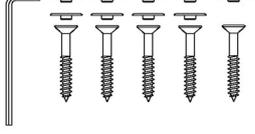
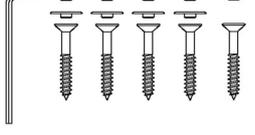


Produkt	VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar
Produktnummer	R1110000
Ergonomie	<p>Die Griffe bieten eine gute Hilfe beim Hinsetzen, Sitzen, Aufstehen und Stehen.</p> <p>Gute breite Stützflächen für Hände und Arme sowie die abgerundete Form geben einen sicheren Halt.</p>
Funktionen	<p>Der Stützklappgriff kann hochgeklappt werden, um Platz zu schaffen.</p> <p>Höhenverstellbar um 135 mm.</p>
Garantie	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p>
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>
Konformitäts- erklärung	<p>Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.</p>

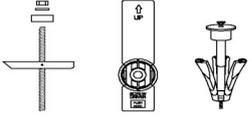
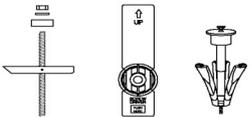


Produkt	VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar
Produktnummer	R1110000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	



Produkt Produktnummer	VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar R1110000	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (5 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (5 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfüterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.