




Produkt Produktnummer	CareSystem Stützklappgriff, höhenverstellbar und seitlich verschiebbar RF548000
Farbe	Weiß
Produkt- beschreibung	 <p>Stützklappgriff mit Federbelastung, 850 mm Ausladung, höhenverstellbar um 250 mm, für Montage auf waagerechter Wandschiene Auslaufmodell per 31/12-2015.</p> <p>Stützklappgriff mit Federbelastung, 850 mm Ausladung, höhenverstellbar um 250 mm, für Montage auf waagerechter Wandschiene Auslaufmodell per 31/12-2015.</p>
Verstellung	Höhen- und seitlich verstellbar
Produktkapazität	Max. Belastbarkeit: 135 kg.
Materialien	Hauptmaterial: 20 Mikrometer anodisiertes Aluminium Oberflächenmaterial: Zwei-Komponenten-Kunststoff (PVC) Abdeckkappen: Arnite (PET,PETP), Abdeckschiene: Styropor (PS)
Ergonomie	Der ovale Querschnitt des Stützklappgriffes ermöglicht einen sicheren Halt. Das Griffende ist aufgrund der ergonomisch sinnvollen Griffabrundung eine weitere gute und hilfreiche Unterstützung beim Hinsetzen und Aufstehen. Das Oberflächenmaterial ist weich, rutsicher und fühlt sich nie kalt an.

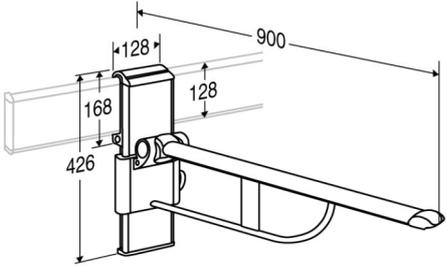

Produkt Produktnummer	CareSystem Stützklappgriff, höhenverstellbar und seitlich verschiebbar RF548000
Funktionen	<p>Der Stützklappgriff kann hochgeklappt werden.</p> <p>Die Unterseite ist zur Montage von verschiedenem Zubehör geeignet.</p> <p>Die Federbelastung sorgt dafür, dass die Bewegung des Stützklappgriffes von der senkrechten in die waagerechte Position gebremst wird. Ein Herunterfallen des Griffes ist nicht möglich.</p> <p>Der Stützklappgriff ist um 250 mm höhenverstellbar und auf der waagerechten Wandschiene verschiebbar.</p>
Reinigung	Pressalit empfiehlt, dass man Kalkablagerungen auf der Wandschiene und andere Aluminiumteile mit einer Mischung aus 3 Teilen 30% Essigsäure und 7 Teilen Wasser entfernt. Wenn die Aluminiumteile mit dieser Auflösung gereinigt worden sind, müssen die Artikel mit einem sauberen Lappen abgewischt und abgetrocknet werden.