




Produkt Produktnummer	PLUS Duschsitz 450, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar R7440182000
Farbe Produkt- beschreibung	Weiß  PLUS Duschsitz 450, mit Rückenlehne. Um 360 mm höhenverstellbar und seitlich verschiebbar. Hochklappbare Sitz. Hellgraue Abdeckplatte auf Wandschiene. Materialien: weicher und komfortabler PUR-Schaum mit Holzkern, montiert auf einem Aluminiumprofil. Zur Nachmontage auf waagerechter PLUS Wandschiene (nicht enthalten). PLUS Duschsitz 450, mit Rückenlehne. Um 360 mm höhenverstellbar und seitlich verschiebbar. Hochklappbare Sitz. Hellgraue Abdeckplatte auf Wandschiene. Materialien: weicher und komfortabler PUR-Schaum mit Holzkern, montiert auf einem Aluminiumprofil. Zur Nachmontage auf waagerechter PLUS Wandschiene (nicht enthalten).
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhen- und seitlich verstellbar 360 mm Maximales Anwendergewicht: 200 kg. Bei einer Belastung der Duschsitz mit 200 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 23 kg. <i>PLUS Duschsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 1,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i>
Materialien Ergonomie	Der Duschsitz besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Sitz und Rückenlehne sind aus PUR-Schaumstoff hergestellt. Beide sind mit einer Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Sitz beinhaltet Sperrholzkern. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Kanten der Rückenlehne und Sitzträger sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt. Ergonomischer Sitz - Sitzfläche 450 x 437 mm. Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an und bietet zugleich einen guten Sitzkomfort.

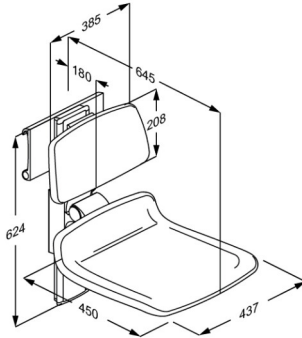

PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Duschsitz 450, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar R7440182000
Funktionen	Der Duschsitz ist hochklappbar, so dass nach Bedarf zusätzliche Bewegungsfläche geschaffen werden kann. Mit Hilfe eines einfachen und sicheres Klicksystems lässt sich Sitzfläche und Rückenlehne gleichzeitig einstellen. Der Duschsitz lässt sich einfach verschieben.
Garantie Reinigung	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausbessert oder neu geliefert werden. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Terralin protect Dismonzon Plus NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Wetrok Caledor Petrosol Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Duschsitz 450, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
Produktnummer	R7440182000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®