




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	PLUS Rückenlehne, höhenverstellbar und seitlich verschiebbar R6444112
<b>Farbe</b>	VVS:777530612 NRF:6317053 EAN:5708590365541 HMI: 124205  Anthrazitgrau
<b>Produkt- beschreibung</b>	 <p>PLUS Rückenlehnen werden in verschiedenen Farben und Versionen angeboten. Sie sind sowohl in fester Höhe als auch verstellbar erhältlich. Sie eignen sich zur Wandmontage hinter einer Toilette ohne Spülkasten oder zur Montage an einem der Pressalit WC-Lifter SELECT.</p> <p>PLUS Rückenlehne, 385 x 209 mm, gepolstert. Um 150 mm höhenverstellbar und seitlich verschiebbar, zur Montage auf waagerechter Wandschiene hinter einer Wand-WC ohne Spülkasten. Abnehmbar ohne Werkzeug und leicht wieder zu anbringen. Material: Aluminium und PUR-Schaumstoff mit einer in-mould-coating Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Zur Nachmontage auf waagerechter PLUS Wandschiene (nicht enthalten).</p>
<b>Verstellung</b> <b>Höhenverstellung</b> <b>Produktkapazität</b>	Höhen- und seitlich verstellbar  150 mm  Maximale Belastbarkeit: 50 kg. Maximales Benutzergewicht: 100 kg. Bei einer Belastung mit 50 kg, trägt jede Befestigungsschraube 33 kg. <i>Rückenlehnen müssen in der Lage sein, das Gewicht der Person zu tragen, die sich dagegen lehnt. Die Rückenlehne soll nicht das gesamte Körpergewicht einer Person tragen. Eine für die Rückenlehne geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung bei 50% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 50 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 100 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i>
<b>Materialien</b>	Der Rückenlehne ist aus PUR-Schaumstoff hergestellt und ist mit einer Oberflächenbeschichtung versehen sowie mit PUR-Klarlack geschützt. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Kanten der Rückenlehne sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt.



<b>Produkt</b>	PLUS Rückenlehne, höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R6444112
<b>Ergonomie</b>	Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an.
<b>Funktionen</b>	Für WC ohne Spülkasten. Der Rückenlehne kan mit eingebautem Spülkasten verwendet werden.
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwenden werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Terralin protect Dismonzon Plus</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Wetrok Caledor Petrosol Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b> Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>
<b>Konformitäts- erklärung</b>	Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.

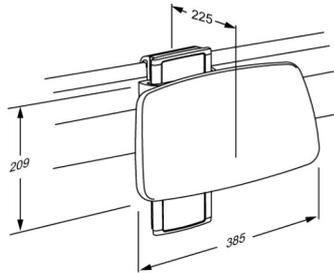

# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS Rückenlehne, höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R6444112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®